


VACUU・LAN® SYSTEM バキューラン・システム

バキューランは、真空ポンプと真空コックを PTFE 配管でネットワーク状に接続したシステムです。真空ポンプ1台で、エバポレーターをはじめとする複数の真空機器を同時に減圧可能です。ユニットには、それぞれ逆止弁を内蔵していますので、異なる真空機器相互の干渉がほとんど無く、使用中に他のバルブを開いても他系統の真空度に影響がほとんどありません。設置も簡単ですので実験台単位の真空ライン構築などに最適です。Mini-Network は、ニードルバルブが予め3個セットされ、実験台やドラフトのスタンドに取り付けることで簡単に3系統のバルブシステムが設置できます。



実験台、ドラフトへの設置例

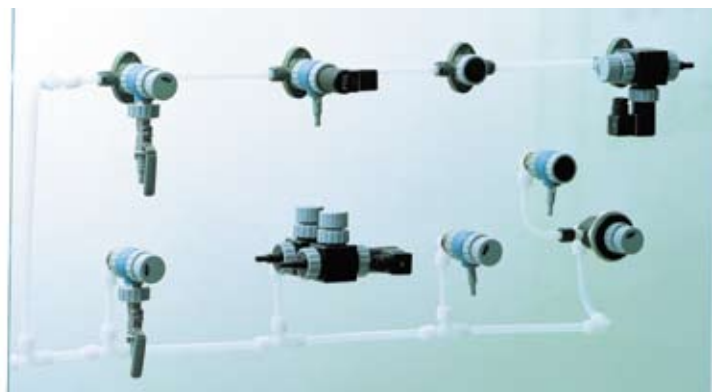

バルブ間の接続は、耐薬品性の高い PTFE チューブ



VCL 01 A1



VCL K A1



VCL 02 A1



VCL-B 10 A1



VACUU・LAN Mini-Network

| モデル | VCL 01 A1 | VCL K A1 | VCL 02 A1 | VCL-B 10 A1 | VACUU・LAN Mini-Network |
|---------|-----------|----------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 仕様 | ニードルバルブ | ボールバルブ | ニードルバルブ +ボールバルブ | 電磁弁 (別途コントローラーが必要) | ニードルバルブ VCL 01 × 3個 |
| Cat.No. | 20677106 | 20677155 | 20677107 | 20677208 | 22614455 |